

## Erstanpassung

€

- Beratung
- Refraktionsbestimmung
- Vermessung des Auges (Topometrie/Ophthalmometrie)
- Tränenfilmanalyse mit und ohne Fluoreszein
- Kontrolle des Vorderen Augenabschnittes
- Auswahl des Kontaktlinsen-Systems
- Beurteilung des Kontaktlinsensitzes
- Anlernen Auf-/Absetzen
- Einweisung Linsenpflege
- Pflegemittelerstausstattung
- Kontaktlinsenprobetragen
- Kontrolltermin

## Material- und Designparameter der AIR OPTIX® Familie


Kontaktlinsenmaterial	Materialklasse	Oberflächenmodifizierung	Oberflächendesign
Fluor-Silikon-Hydrogele aus Lotrafilcon oder Sifilcon	FDA-Gruppe I nicht ionisch	Plasma-Coating Verfahren für eine homogene, benetzbare und ablagerungsresistente Oberfläche	Asphärische Vorder- und Rückfläche
Ihr Vorteil	Ihr Vorteil	Ihr Vorteil	Ihr Vorteil
<b>Zwei-Phasen-Konzept</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Sauerstoffdurchlässigkeit (bis Dk/t 175)</li> <li>• Verhindert das „Festsaugen“ der Kontaktlinse am Auge</li> <li>• Der Wassergehalt hält die Kontaktlinse weich</li> </ul> <b>Material-Elastizität (Modulus)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gute Handhabungseigenschaften</li> <li>• Sehr gute Bewegung auf dem Auge</li> <li>• Sehr guter Austausch der Tränenflüssigkeit unter der Kontaktlinse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringe Ablagerungsneigung aufgrund „Anti-Statischer“ Oberfläche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einwandfreie Benetzung über den gesamten Nutzungszeitraum von 30 Tagen</li> <li>• Optimaler Fluss der Sauerstoffmoleküle</li> <li>• Kein Abrieb der Oberfläche möglich</li> <li>• Nutzung aller Pflegemittel, auch Wasserstoffperoxyd und manueller Reiniger, möglich</li> <li>• Geringste Ablagerung bei Lipiden und Lysozymen bei Anwendung von AOSEPT® PLUS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr gute Bewegung und optimaler Sitz für beste Sehqualität</li> <li>• Kontinuierlicher Austausch der Tränenflüssigkeit unter der Kontaktlinse</li> <li>• Sehr hohe Sauerstoffdurchlässigkeit</li> </ul>

## Nachkontrolle

€

- Vorgespräch/Informationsaustausch
- Sehschärfeüberprüfung und Zusatzrefraktion
- Beurteilung des Kontaktlinsensitzes
- Überprüfung der Kontaktlinsenoberfläche/-rand
- Ggf. Vermessung des Auges (Topometrie/Ophthalmometrie)
- Tränenfilmanalyse mit und ohne Kontaktlinse
- Kontrolle des Vorderen Augenabschnittes
- Abschlussgespräch

## Sauerstoffdurchlässigkeit von Austauschkontaktlinsen

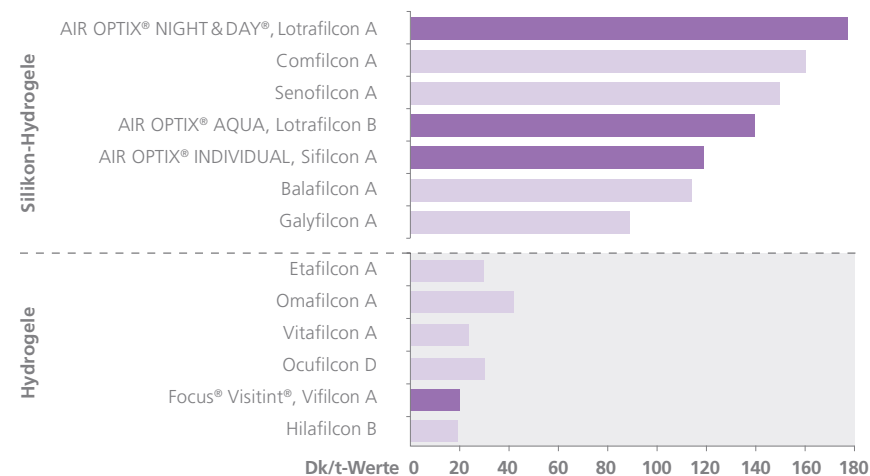

		Vorteile für den Kunden	Kontaktlinsen			Empfohlenes Pflegemittel	System-Preis
			Sphärisch	Torisch	Multifocal		
Ein-Tages-Kontaktlinsen	Premium-Ein-Tages-Linse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoher Spontankomfort und lang anhaltender Premium Tragekomfort bis spät in den Abend</li> <li>Lange Tragezeiten: täglich, während der Wachphasen</li> <li>Einfache Handhabung</li> <li>Handhabungstönung</li> <li>Täglicher Austausch, keine Pflegemittel notwendig</li> <li>Keine Konservierungsstoffe</li> <li>Ideal für Allergiker</li> <li>30'er und 90'er Pack</li> </ul>	<b>DAILIES® AquaComfort Plus®</b>  Für Brillenwerte* von: Sph. -11,75 dpt bis +5,50 dpt			keine Reinigung und Desinfektion notwendig	<b>SoftWear® Saline</b> (zum Abspülen) 
	Komfort-Ein-Tages-Linse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoher Tragekomfort bis spät in den Abend</li> <li>Lange Tragezeiten: täglich, während der Wachphasen</li> <li>Einfache Handhabung</li> <li>Handhabungstönung</li> <li>Täglicher Austausch, keine Pflegemittel notwendig</li> <li>Keine Konservierungsstoffe</li> <li>Ideal für Allergiker</li> <li>Auch für Hornhautverkrümmung</li> <li>Auch für Alterssichtigkeit (Presbyopie)</li> <li>30'er und 90'er Pack (PROGRESSIVES nur 30'er Pack)</li> </ul>	<b>Focus® DAILIES® All Day Comfort</b>  Für Brillenwerte* von: Sph. -11,75 dpt bis +5,50 dpt	<b>Focus® DAILIES® TORIC</b>  Für Brillenwerte* von: Sph. -9,00 dpt bis +4,00 dpt Cyl. bis -2,75 dpt	<b>Focus® DAILIES® PROGRESSIVES</b>  für Gebrauchswerte von: Sph. -6,00dpt bis +5,00dpt Inkl. ADD bis +3,00 dpt		
Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen	Premium-Plus-Monatslinse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Höchste Sauerstoffdurchlässigkeit aller CIBA VISION Kontaktlinsen (DK/t = 175)</li> <li>Sehr lange Tragezeit: Tragezeit bis zu 24h täglich, bei entsprechender Eignung Non Stopp Tragen möglich, bis zu 30 Tage und Nächte</li> <li>Hervorragender Tragekomfort</li> <li>Empfohlen bei trockenen und sensiblen Augen</li> <li>Sehr geringe Ablagerungsneigung</li> </ul>	<b>AIR OPTIX® NIGHT &amp; DAY®</b>  Für Brillenwerte* von: Sph. -11,75 dpt bis +5,50 dpt			<b>AOSEPT® PLUS</b> Ideal für Silikon-Hydrogel-Linsen  <b>SOLOCARE AQUA®</b> 	<b>AQuify®</b> Nachbenetzung 
	Premium-Komfort-Monatslinse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr hohe Sauerstoffdurchlässigkeit (DK/t = 108 - 138)</li> <li>Lange Tragezeiten: bis zu 24h täglich, bei entsprechender Eignung Über-Nacht-Tragen bis zu 7 Tage und 6 Nächte möglich</li> <li>Hoher Spontan und hervorragender Tragekomfort</li> <li>Geringe Ablagerungsneigung</li> <li>Handhabungstönung</li> <li>Auch für Hornhautverkrümmung</li> <li>Auch für Alterssichtigkeit (Presbyopie)</li> </ul>	<b>AIR OPTIX® AQUA</b>  Für Brillenwerte* von: Sph. -11,75 dpt bis +5,50 dpt	<b>AIR OPTIX® for ASTIGMATISM</b>  Für Brillenwerte* von: Sph. -10,25 dpt bis +5,50 dpt Cyl. bis -2,75 dpt	<b>AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL</b>  Für Brillenwerte* von: Sph. -11,75 dpt bis +5,50 dpt ADD +0,75 dpt bis +2,50 dpt		
	Premium-Individual-3 Monatslinse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr hohe Sauerstoffdurchlässigkeit (DK/t = 117)</li> <li>Lange Tragezeiten: täglich, während der Wachphasen</li> <li>Hervorragender Tragekomfort</li> <li>Individuell gefertigt</li> <li>Für große und kleine Augen</li> <li>Für hohe Fehlsichtigkeiten</li> <li>Geringe Ablagerungsneigung</li> <li>Handhabungstönung</li> </ul>	<b>AIR OPTIX® INDIVIDUAL</b>  Für Brillenwerte* von: Sph. -27,75dpt bis +15,75dpt				

\* Umrechnung von HSA=14 auf HSA=0mm.